


# ZSI 475 FTM

## IMPLANTE DE PENE HIDRÁULICO

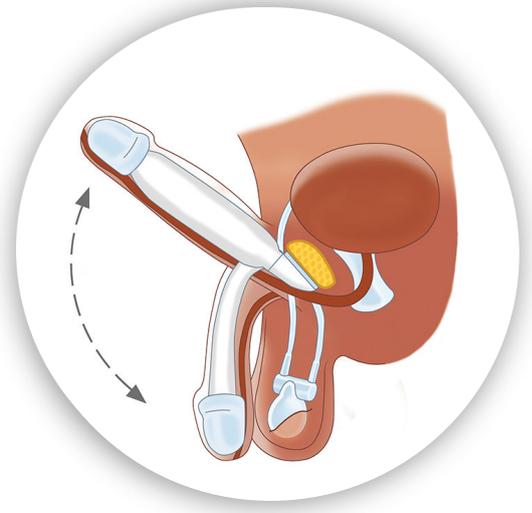

### La solución para la Faloplastia

- diseñado para FTM.
- más información en: [www.zsimplants.ch](http://www.zsimplants.ch)

ZSI es ISO 13485 : 2004 / ZSI 475 FTM está certificado por la UE

Distribuidor Local

ZSI (Zephyr Surgical Implant Sàrl)  
C/Ulmann, route des Jeunes 4bis  
1227 Les Acacias - Switzerland

  
Volante Español  
Version 2, Jul 2016



## ZSI 475 FTM IMPLANTE DE PENE HIDRÁULICO DISEÑADO PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS COSMÉTICOS Y UN ALTO NIVEL DE ESTABILIDAD

UN CILINDRO, 3 TAMAÑOS, 120 MM, 150 MM, 180 MM DE LONGITUD  
ES FÁCIL DE IMPLANTAR Y SE FIJA DE FORMA RESISTENTE

### PARTE PROXIMAL

30mm x 25mm.

### PARTE CENTRAL

diámetro del cuerpo principal:  $\varnothing$  21-22 mm

### PARTE DISTAL

diámetro del glande: 25 mm



Glande de apariencia realista




La parte proximal está hecha de acero inoxidable y silicón, y se ajusta al hueso púbico.  
4 Fijaciones de  $\varnothing$  3mm




Depósito implantado en la cavidad pélvica




## CÓMO FUNCIONA

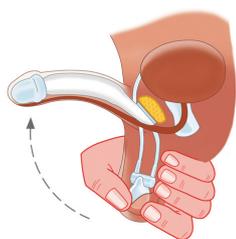


1. Presione el bulbo para inflar la prótesis.

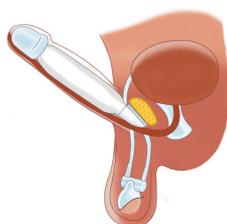

2. Pene erecto.

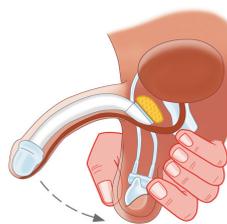

3. Presione el cilindro para desinflar la prótesis.

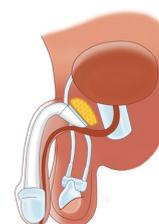

4. Pene flácido