




ZSI 375 PF **ESFÍNCTER URINÁRIO** **ARTIFICIAL**



ZSI 475 **PRÓTESE PENIANA** **HIDRÁULICA**

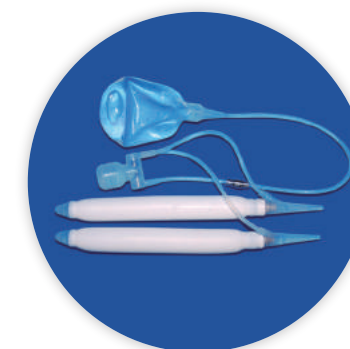

Mais informações em:
www.zsimplants.ch

12
ANOS
ANIVERSÁRIO
2007-2019



A solução para
a incontinência masculina
a impotência masculina






ZSI 375 PF


PRÉ-CONECTADO
PRÉ-CHEIO COM SOLUÇÃO SALINA
PRESSÃO AJUSTÁVEL

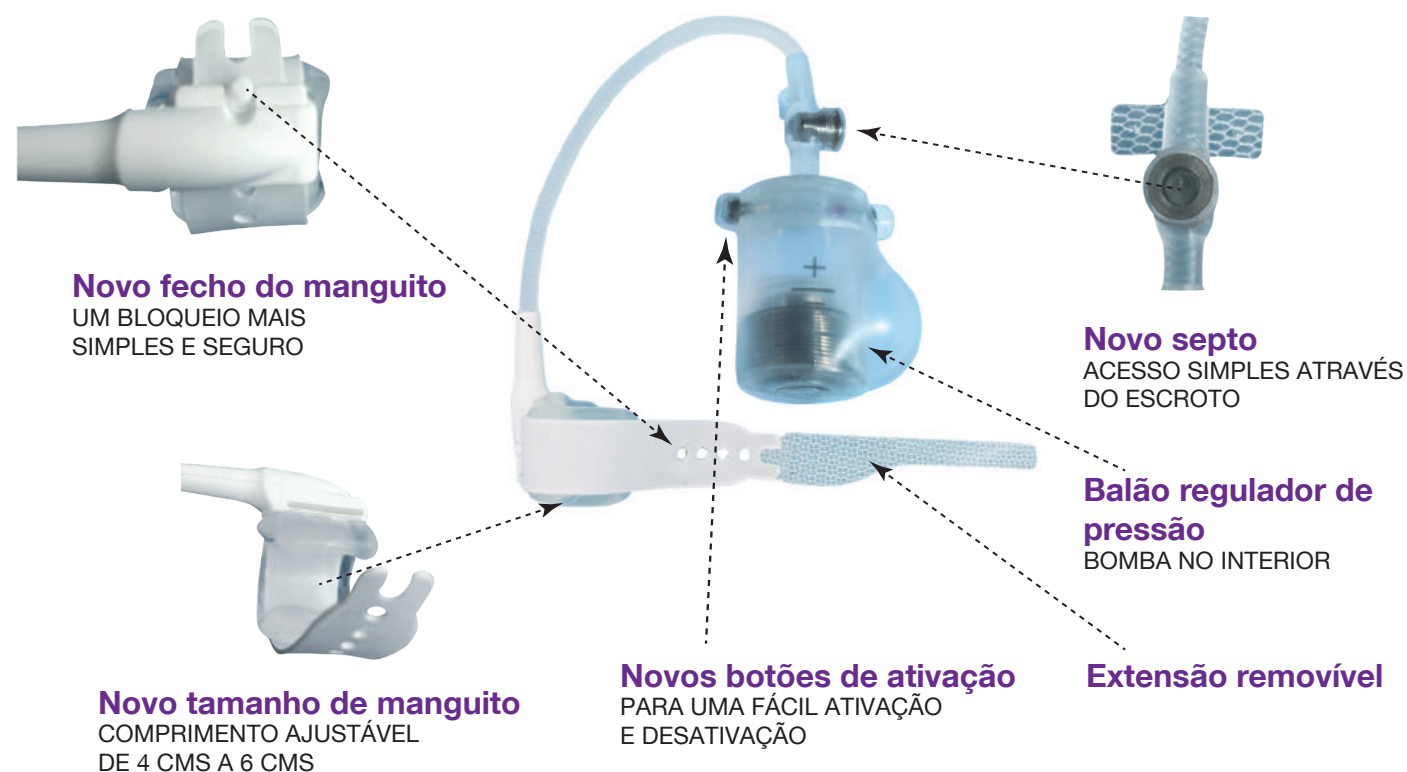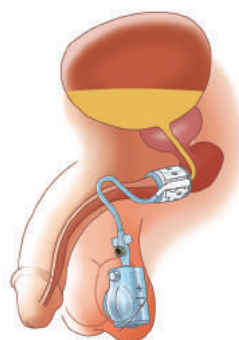


O ZSI 375 PF é entregue pré-preenchido e pré-conectado. Assim, o tempo de preparação na sala de operação é significativamente minimizado.

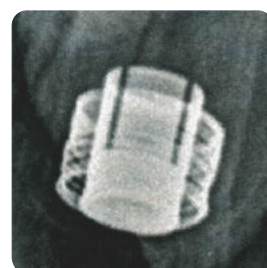

O esfíncter está desativado.
A mola é comprimida.
Para ativação, pressione o botão de ativação.

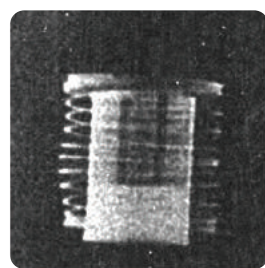



O esfíncter está preparado para funcionamento, após ativação da mola, situada no topo do cilindro.

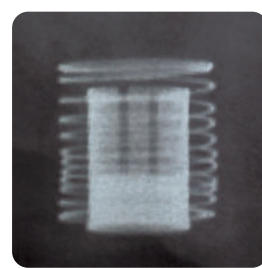


Se necessário, a mola tanto pode ser movida para a parte superior como inferior, do cilindro opaco do circuito hidráulico.

ZSI 475

TODOS OS TAMANHOS DE IMPLANTE E ACESSÓRIOS
PENIANOS ESTÃO DISPONÍVEIS APENAS NUMA EMBALAGEM
REVESTIMENTO HIDROFÍLICO

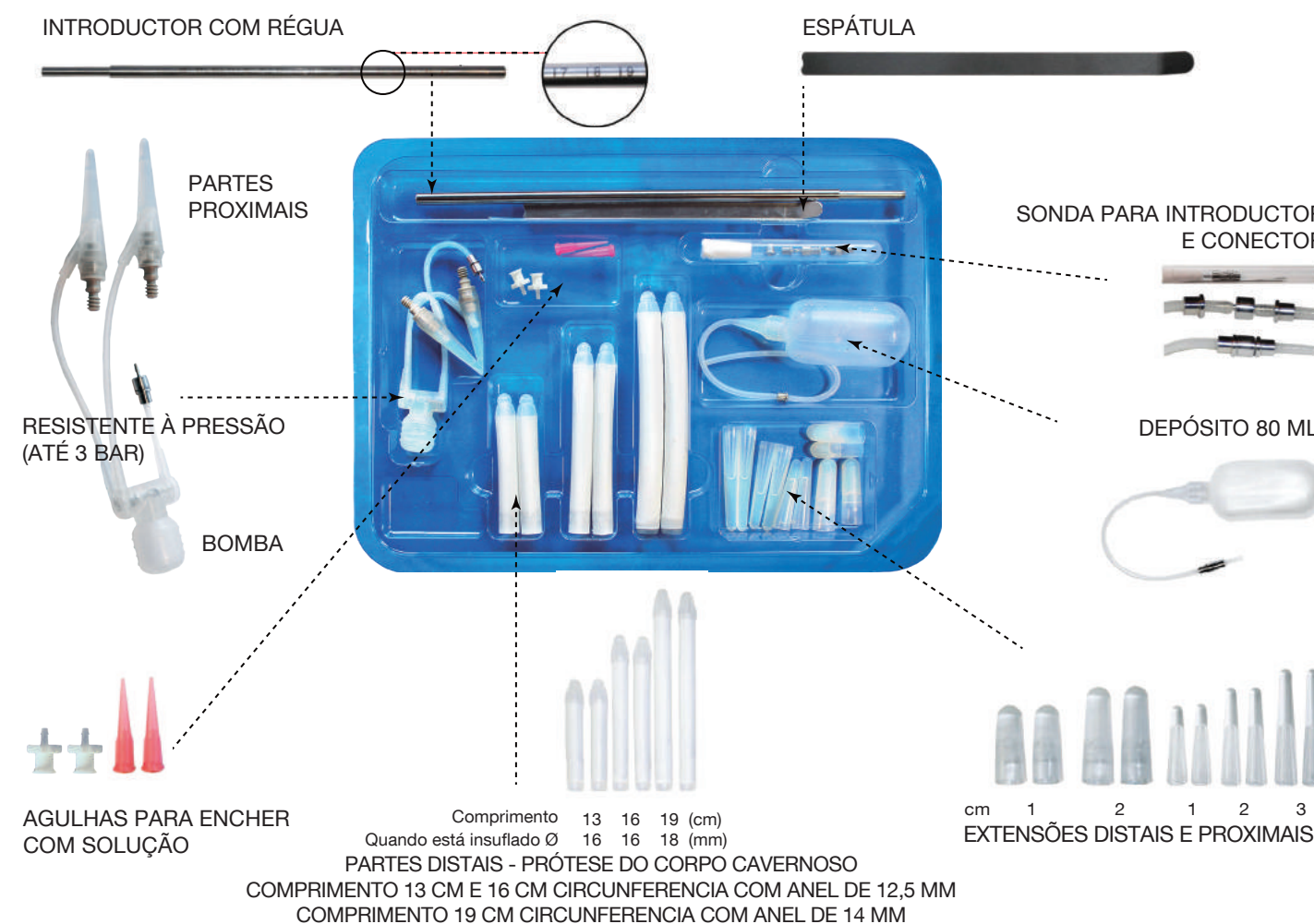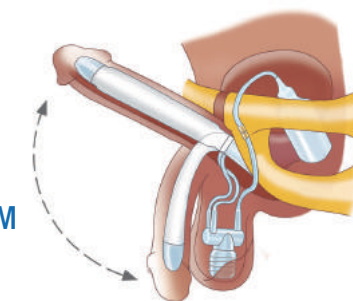

MONTAGEM FÁCIL E SEGURA

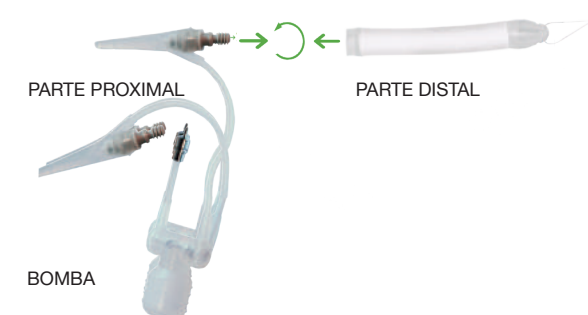

A bomba é conectada na parte proximal e ajustada ao cilindro, sob pressão. Não é necessário nenhum instrumental.

Para os pênis de tamanho maior, oferecemos um set especial com um comprimento de base de 22 cm, que pode ser ajustado de 21 a 27 cm. Diâmetro do cilindro 21 mm na parte superior, 14 mm na base.