


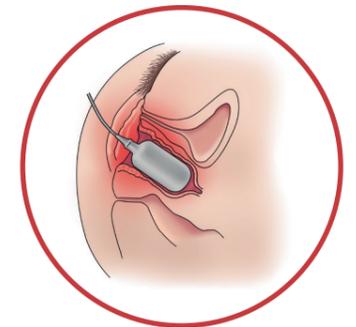


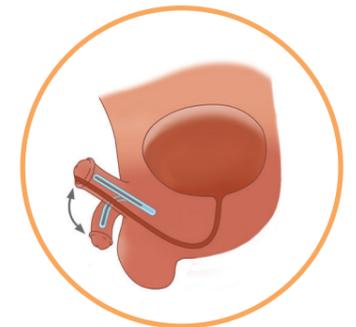


Más información:
www.zsimplants.ch

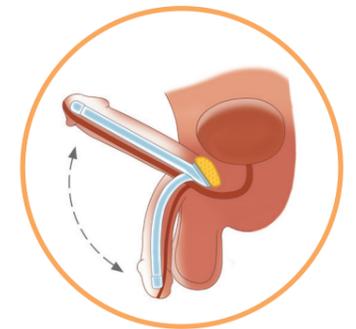

La mejor solución
para cirugías de
reasignación de sexo

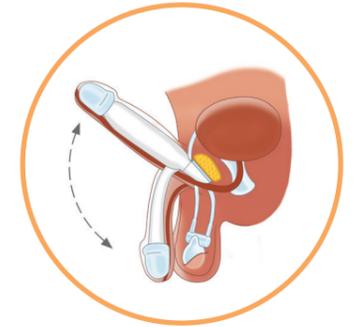

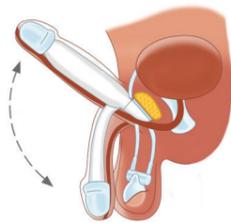


ZSI 475 FTM IMPLANTE HIDRÁULICO PARA FALOPLASTIA

- Implante peneano de 3 componentes.
- Fijación en el hueso púbico.
- 1 cilindro, 4 medidas 120/150/180/210 mm.
- 1 cilindro hecho para ofrecer una estabilidad perfecta y lindos resultados cosméticos.
- Un glande de 25 mm de ancho con un pasaje reservado para la uretra.

PARTE DISTAL : Glande de 25 mm de ancho
PARTE CENTRAL : 21-22 mm de diámetro
PARTE PROXIMAL : 30 mm*25 mm




- Bomba diseñada como prótesis testicular para mejores resultados cosméticos.
- Fácil acceso al Botón de deflación.*

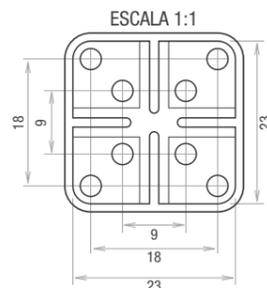


Parte proximal hecha con acero inoxidable y silicona. Se fija firmemente al hueso púbico con 8 broches

Está firmemente fijado al hueso púbico

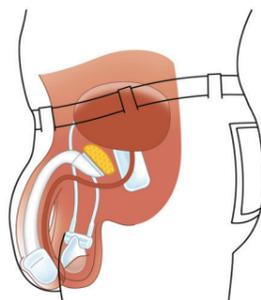

Mejor confort en pantalones.

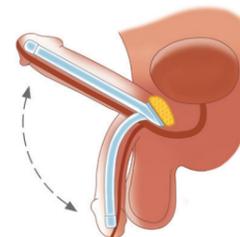

ZSI 100 FTM IMPLANTE DE PENE MALEABLE PARA LA FALOPLASTÍA

MODELO ESTÁNDAR

- Implante peneano de 1 componente.
- Fijación segura en el hueso púbico hecha para asegurar una estabilidad excelente Resultados cosméticos satisfactorios.
- Parte proximal con 4 agujeros.
- 1 cilindro ajustable de 13 cm a 20 cm.

PARTE DISTAL : Ajustable cortando cada 5 mm
PARTE CENTRAL : Cilindro de 22 mm de ancho Hecho para la comodidad y una linda apariencia.
PARTE PROXIMAL : 30 mm*25 mm Está fijada en el hueso púbico




MODELO ESTRECHO

- Implante peneano de 1 componente.
- Fijación segura en el hueso púbico hecha para asegurar una estabilidad excelente Resultados cosméticos satisfactorios.
- Parte proximal con 4 agujeros.
- 1 cilindro ajustable de 13 cm a 22 cm.
- Diámetro: 13 mm.




ESCALA 1:1

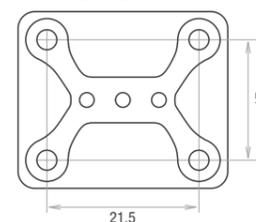


Parte proximal hecha con acero inoxidable y silicona. Se fija firmemente al hueso púbico con 4 broches

Está firmemente fijado al hueso púbico


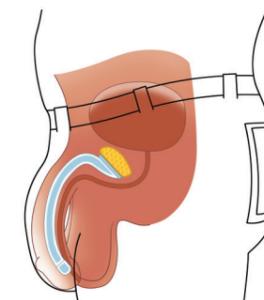


Confort óptimo usando pantalones.

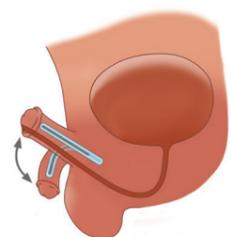

ZSI 100 IMPLANTE MALEABLE PARA METOIDIOPLASTIA

- Un par de cilindros de silicona con un cable de plata
- Largo 12 cm que se reduce hasta 5 cm
- Diámetro 4 mm

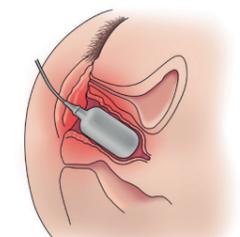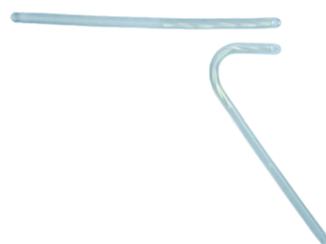

ZSI 200 EXPANDER PARA VAGINOPLASTIA

- Expansor inflable.
- Hecho de silicona biocompatible.
- Largo de 90 mm y 120 mm.
- Diámetro 40 mm.

