


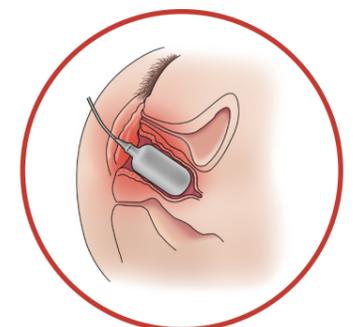
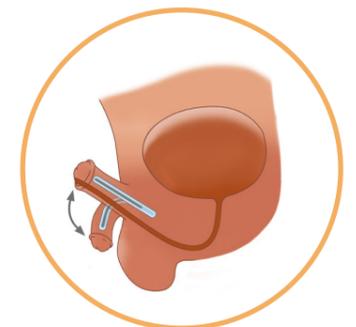


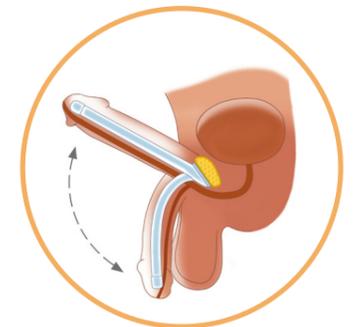

Más información:  
[www.zsimplants.ch](http://www.zsimplants.ch)

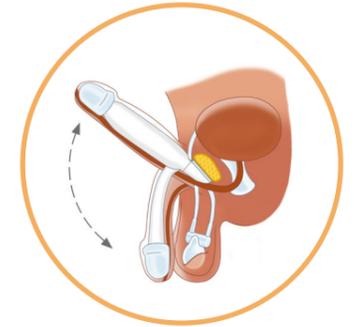


La mejor solución  
para cirugías de  
reasignación de sexo

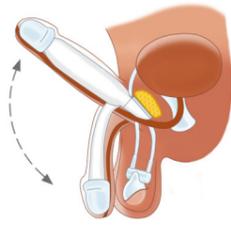


## ZSI 475 FTM IMPLANTE HIDRÁULICO PARA FALOPLASTIA

- Implante peneano de 3 componentes.
- Fijación en el hueso púbico.
- 1 cilindro, 4 medidas 120/150/180/210 mm.
- 1 cilindro hecho para ofrecer una estabilidad perfecta y lindos resultados cosméticos.
- Un glande de 25 mm de ancho con un pasaje reservado para la uretra.

PARTE DISTAL : Glande de 25 mm de ancho  
 PARTE CENTRAL : 21-22 mm de diámetro  
 PARTE PROXIMAL : 30 mm\*25 mm

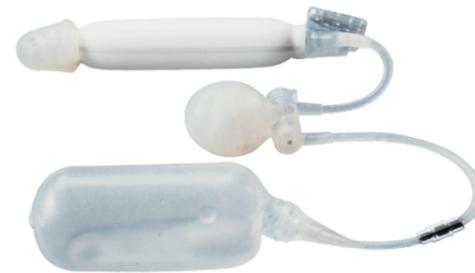


- Bomba diseñada como prótesis testicular para mejores resultados cosméticos.
- Fácil acceso al Botón de deflación.\*

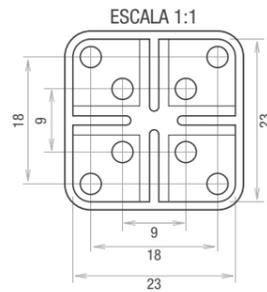


Parte proximal hecha con acero inoxidable y silicona. Se fija firmemente al hueso púbico con 8 broches

Está firmemente fijado al hueso púbico

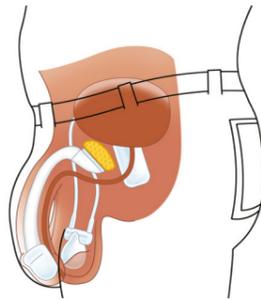

Mejor confort en pantalones.

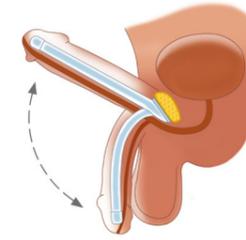

## ZSI 100 FTM MALLEABLE PENILE IMPLANT FOR PHALLOPLASTY

### MODELO ESTÁNDAR


- Implante peneano de 1 componente.
- Fijación segura en el hueso púbico hecha para asegurar una estabilidad excelente Resultados cosméticos satisfactorios.
- Parte proximal con 4 agujeros.
- 1 cilindro ajustable de 13 cm a 20 cm.

PARTE DISTAL : Ajustable cortando cada 5 mm  
 PARTE CENTRAL : Cilindro de 22 mm de ancho Hecho para la comodidad y una linda apariencia.  
 PARTE PROXIMAL : 30 mm\*25 mm Está fijada en el hueso púbico




### MODELO ESTRECHO

- Implante peneano de 1 componente.
- Fijación segura en el hueso púbico hecha para asegurar una estabilidad excelente Resultados cosméticos satisfactorios.
- Parte proximal con 4 agujeros.
- 1 cilindro ajustable de 13 cm a 22 cm.
- Diámetro: 13 mm.

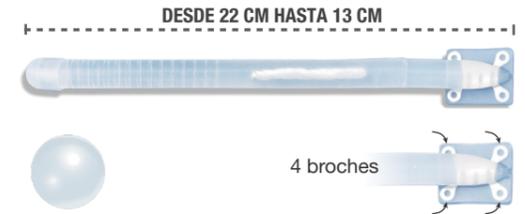


ESCALA 1:1

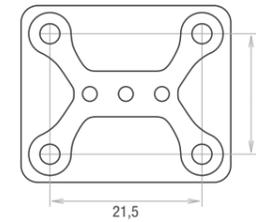

Parte proximal hecha con acero inoxidable y silicona. Se fija firmemente al hueso púbico con 4 broches

Está firmemente fijado al hueso púbico

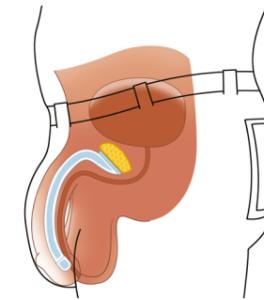


Confort óptimo usando pantalones.



## ZSI 100 IMPLANTE MALLEABLE PARA METOIDIOPLASTIA

- Un par de cilindros de silicona con un cable de plata
- Largo 12 cm que se reduce hasta 5 cm
- Diámetro 4 mm

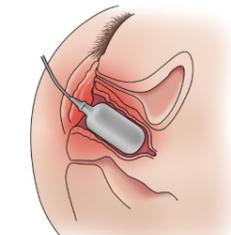

## ZSI 200 STENT PARA VAGINOPLASTIA

- Expansor inflable con aire.
- Hecho de silicona, con PVP para mantener el aire.
- Componentes biocompatibles.
- Largo de 9 cm o 12 cm.
- Diámetro 4 cm.

