


ZSI 100 FTM

IMPLANTE DE PENE MALEABLE

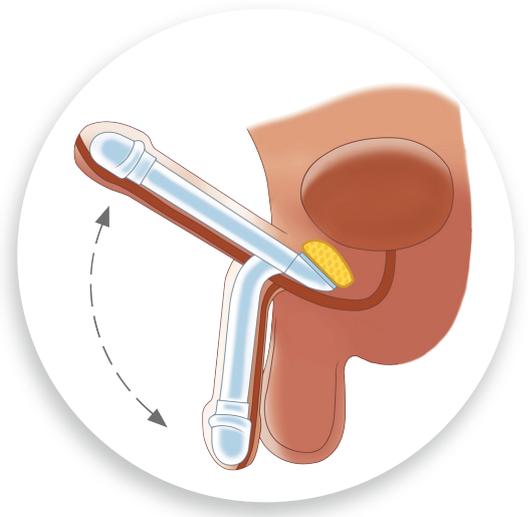

La solución para la Faloplastia

- diseñado para FTM.
- más información en: www.zsimplants.ch

ZSI es ISO 13485 : 2004 / ZSI 475 FTM está certificado por la UE

Distribuidor Local

ZSI (Zephyr Surgical Implant Sàrl)
C/Ulmann, route des Jeunes 4bis
1227 Les Acacias - Switzerland


Volante Español
Version 2, Jul 2016



IMPLANTE DE PENE SEMIRRÍGIDO ZSI 100 FTM DISEÑADO PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS COSMÉTICOS Y UN ALTO NIVEL DE ESTABILIDAD

PARTE DISTAL

Para ajustarla, se puede cortar 5 mm x 5 mm.




PARTE CENTRAL

Cilindro de Ø 22mm de ancho. Tiene un diseño cómodo y su apariencia es agradable. Varilla interior reforzada que se dobla fácilmente.



PARTE PROXIMAL

30 mm x 25 mm
Se ajusta firmemente al hueso púbico.
6 Fijaciones.

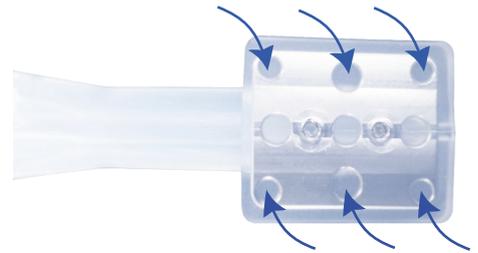

DESDE 16 CM HASTA 13 CM CON VARILLA (HASTA 10 CM SIN VARILLA*)




Tapón del glande de 25 mm de ancho y con forma natural

De acero inoxidable y silicón

* Para una faloplastia corta, se puede retirar la varilla tras realizar una incisión en el silicón.




Se ajusta firmemente al hueso púbico

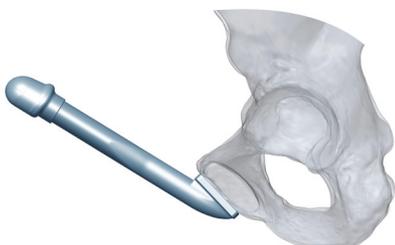

Cómo funciona

ZSI 100 FTM con varilla

Con una mano, mantenga el implante firme sosteniendo el cilindro en la base. Con la otra mano, mueva el implante.

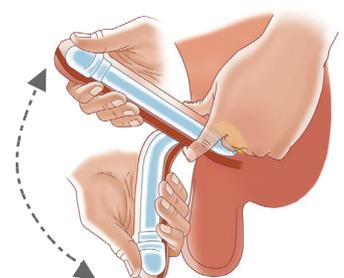

ZSI 100 FTM (corto) sin varilla

